



品名	<b>未来の歯ブラシ 歯美 ing</b>
材質	柄 / ポリプロピレン 毛 / ナイロン
耐熱温度	80 度
内容量	1 本
毛のかたさ	ふつう
価格	2,035 円 (税込)

## 商品概要

歯間や歯と歯肉の境を同時に磨くことができる、歯科医がつくった全く新しい歯ブラシの形。  
歯間や歯と歯肉の境を同時に磨くことができ、矯正装置のブラケットやワイヤーの間も上下から同時に磨くことができる歯ブラシです。  
磨き残しが少ない、歯科医が作った全く新しい歯ブラシの形です。普通の歯ブラシや歯間ブラシではどうしても磨けない歯と歯の間に届きます。  
歯間にフィットする画期的なカタチで矯正中の方にも最適です。


## 歯科医開発、歯美 ing の特徴



歯美ing  
全く新しい歯ブラシの形

- ・乳歯～永久歯までワンサイズでご使用可能。
- ・歯間だけでなく歯の表面・歯肉の境目までまんべんなく簡単に磨けます。
- ・矯正装置のブラケットやワイヤーの間も上下から同時に磨くことができます。
- ・基本的にブラシの柄を水平にして上の歯も下の歯も磨いてください。  
動きは横に小刻みに動かし、回転や押し込む動作を加えて磨いてください。

## ご使用方法

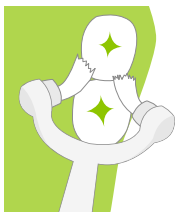

頬側舌側の歯間や歯と歯肉の境目を同時に磨くことができます。

頬側舌側の歯間や歯と歯肉の境目を簡単に同時に磨くことができます。




咬合面と頬側面を同時に磨ける

頬側に回転させると咬合面と頬側面を同時に磨くことができます。



矯正装置のブラケットやワイヤーの間も上下から同時に磨くことができます。

矯正装置のブラケットやワイヤーの間も上下から同時に磨くことができます。

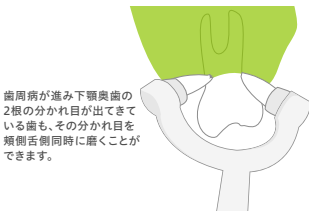

歯周病が進み下顎奥歯の2根の分かれ目が出てきている歯も、その分かれ目を頬側舌側同時に磨くことができます。

歯周病が進み下顎奥歯の2根の分かれ目が出てきている歯も、その分かれ目を頬側舌側同時に磨くことができます。



V字のブラシの形を使って舌を後ろから前にかき出すように磨くことができます。

V字のブラシの形を使って舌を後ろから前にかき出すように磨くことができます。

商品に関するより詳しい情報は下記よりお問い合わせください。

## フリーダム株式会社

〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川 1-8-13 山崎ビル1階

TEL:045-548-3259・FAX:045-548-3269 E-mail:info@fdmjp.co.jp

WEB:http://www.fdmjp.co.jp/ オンラインショップ:http://www.shopfdmjp.net/



この商品の情報は  
こちらから